

INSTRUKCJA – APLIKACJA IMPORTU WYNIKÓW VETLABORATORIA

Dla Klientów Vetlaboratoria korzystających z **Klinika XP** stworzona została aplikacja, dzięki której nie będzie konieczne ręczne zapisywanie wyników przesyłanych na pocztę e-mail, aby zaimportować je do Klinika XP. Zainstalowana aplikacja będzie działała w tle, więc po zalogowaniu się do systemu Windows nie ma potrzeby jej uruchamiania.

Do skonfigurowania aplikacji wymagana jest znajomość loginu i hasła do platformy internetowej <https://vetlaboratoria.pl/>


Jeżeli nie znamy loginu i hasła – prosimy o kontakt z handlowcem

Ewelina Sudomir -Pietrzak tel. 532-514-215

Marta Kielkowska tel. 880-349-560.

Konfiguracja - Etap I – Instalacja aplikacji Vetlaboratoria Wyniki

1. Ściągamy ze strony <https://vetlaboratoria.pl/do-pobrania> (zakładka do pobrania) plik z instalatorem programu - **Pobierz aplikację**. W przypadku komunikatu, że plik jest **rzadko pobierany** klikamy 3 kropki lub strzałkę obok komunikatu i wybieramy zachowaj (program jest stworzony tylko dla naszych klientów, więc nie jest jeszcze wystarczająco popularny i system Windows lub przeglądarka może pokazać taki komunikat).

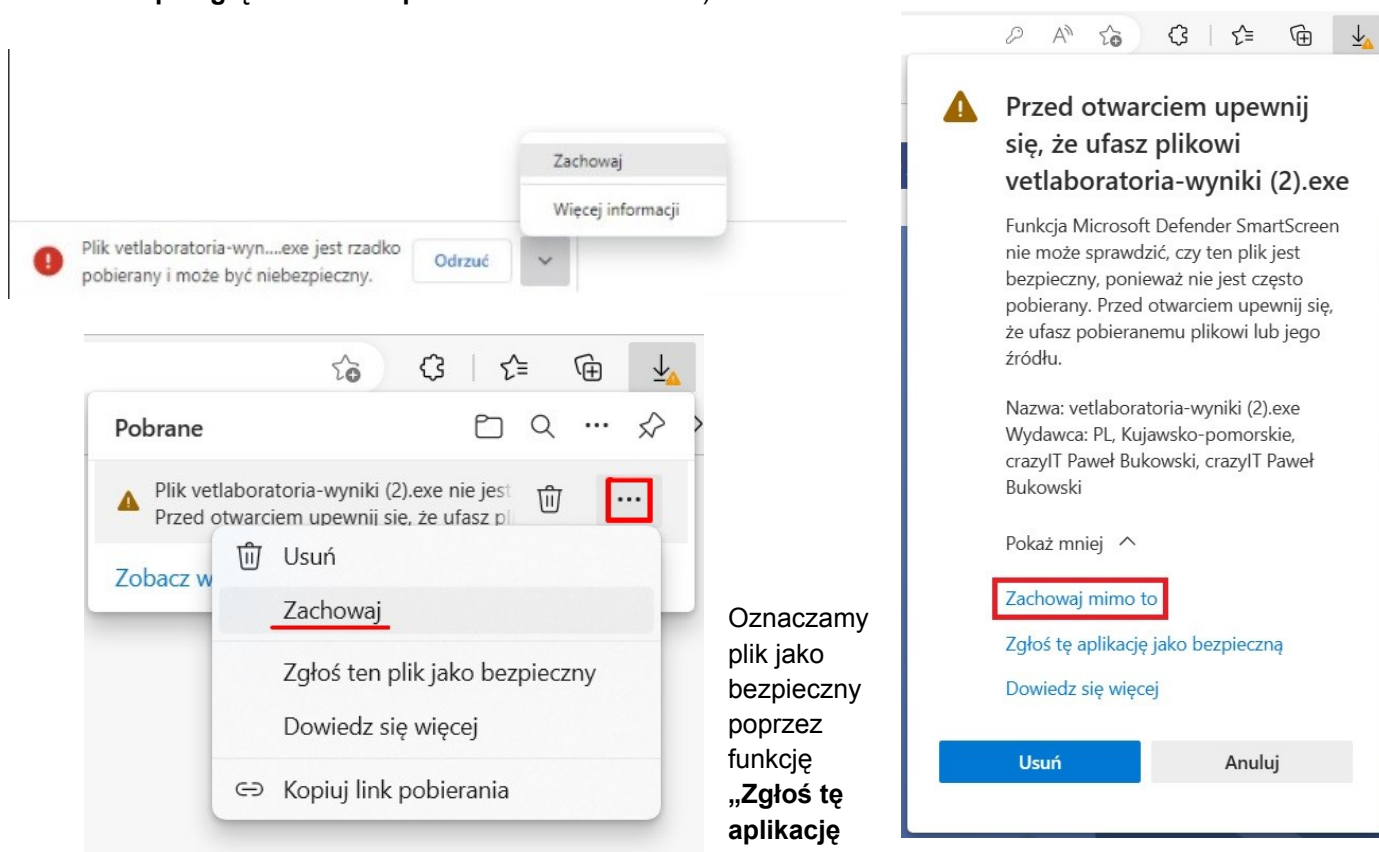


Oznaczamy plik jako bezpieczny poprzez funkcję „Zgłoś tę aplikację jako bezpieczną” / „Zgłoś ten plik jako

bezpieczny”.


2. Uruchamiamy go.




Jeżeli pojawi się komunikat smart screen prosimy kliknąć „**Więcej informacji**” a następnie „**Uruchom mimo to**”:

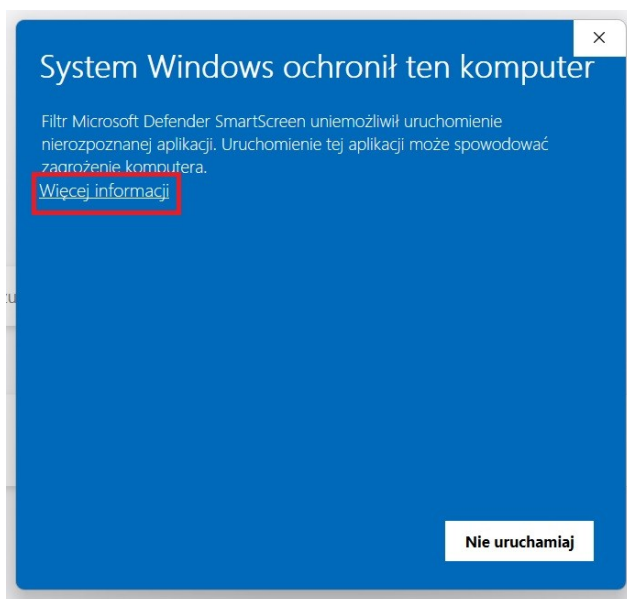


3. Przechodzimy przez instalację klikając „*Dalej*”. W pierwszym kroku możemy określić w jakim miejscu ma zostać zainstalowana aplikacja – zalecany jest zostawienie domyślnej lokalizacji.

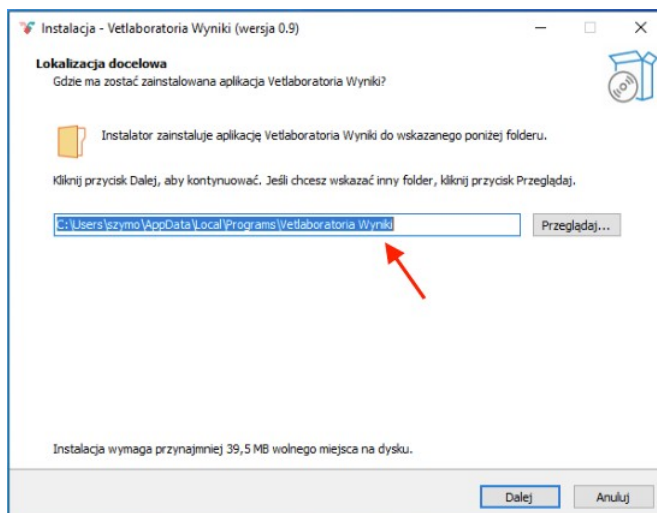


4. Decydujemy czy na pulpicie ma zostać utworzony skrót do aplikacji czy też nie. Nie ma konieczności jego tworzenia – program domyślnie będzie uruchamiany razem z systemem Windows i będzie działał w tle przekazując wyniki z platformy do folderu programu Klinika XP.

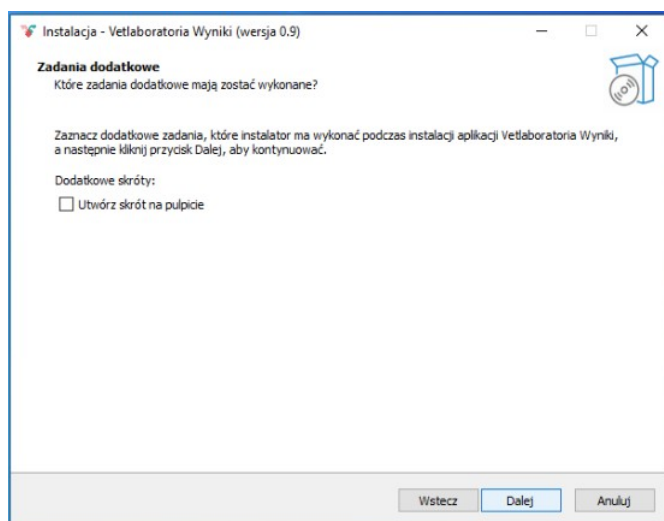

5. Potwierdzamy rozpoczęcie instalacji przyciskiem „Instaluj”.

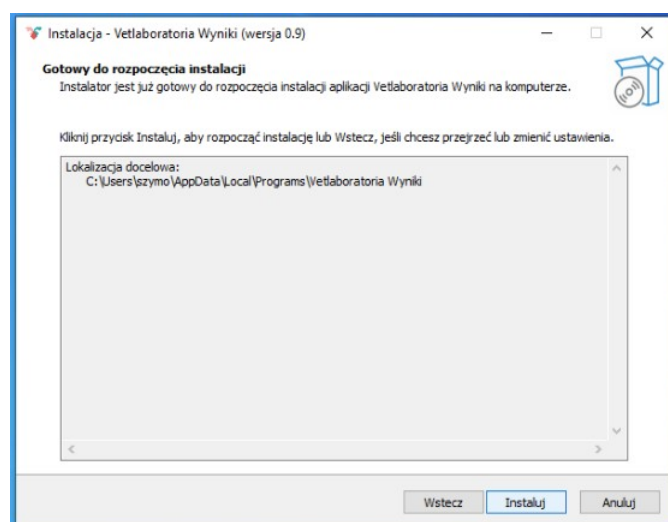

6. Jeżeli po instalacji wyskoczy komunikat o zabronionym dostępie do folderu należy zezwolić ręcznie na taki dostęp.

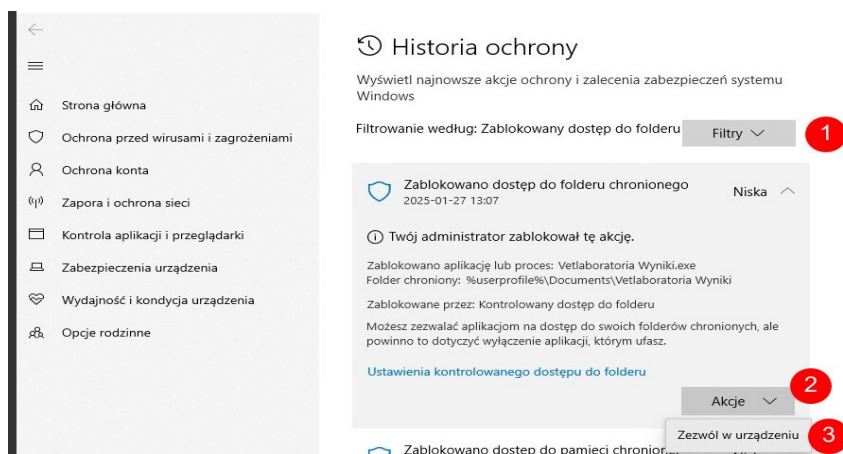

Konfiguracja - Etap II – Konfiguracja połączenia

Opcja ZALECANA – wyniki poprzez konto Vetlaboratoria.pl


1. Po uruchomieniu aplikacji pozostawiamy wybrane „konto Vetlaboratoria” i wpisujemy login i hasło którym zwyczajowo logujemy się na stronie:

<https://vetlaboratoria.pl/user/login>


2. Jeżeli nie znamy loginu i hasła – prosimy o kontakt z handlowcem

Ewelina Sudomir-Pietrzak tel. 532-514-215 lub Marta Kielkowska tel. 880-349-560.


Kilkukrotne błędne logowanie zawiesi dostęp do konta na 1 dzień.

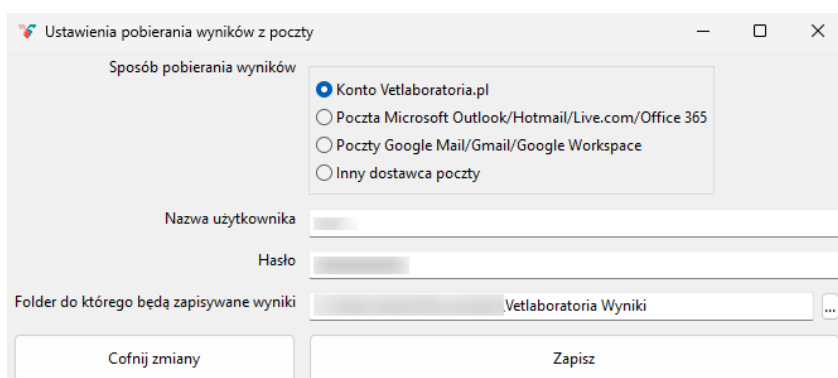

2. Zainstalowany program pracuje w tle. Jego ikonka jest widoczna u dołu ekranu na pulpicie.

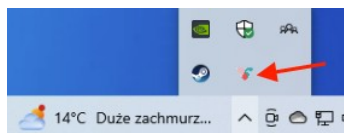


3. Przy każdym naciśnięciu ikonki, otrzymamy informację kiedy ostatnio program sprawdzał pocztę w poszukiwaniu nowych wyników badań lub ew. błędu.

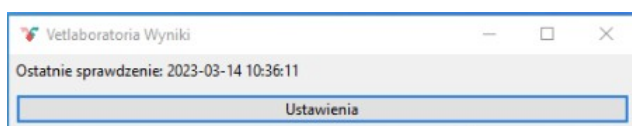


Konfiguracja - Etap III – Ustawienie importu wyników do Klinika XP

Importowanie nowych wyników

1. Jeśli posiadamy już folder, w którym znajdują się wyniki, możemy przejść do konfiguracji Kliniki XP. Wczytanie wyników jest możliwe po wejściu w nawigatorze do opcji: Znajdź funkcję → Import z laboratorium lub zakładka u góry okna Leczenie → Import z laboratorium.

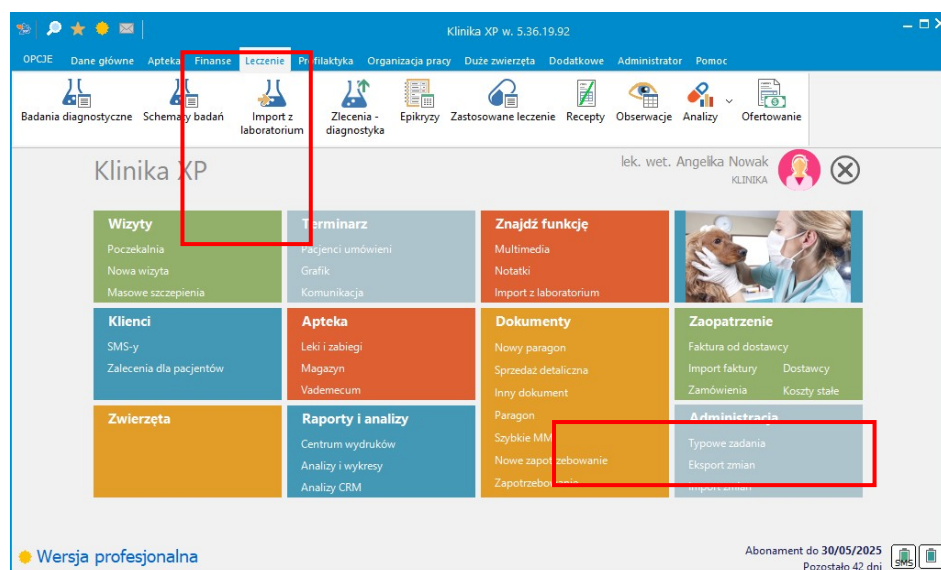


2. Pojawi się wówczas okno „Importowanie wyników badań z zewnętrznego laboratorium” w którym to należy w pierwszej kolejności określić folder, w którym znajdują się wyniki. Wywołanie: Operacje → Parametry automatycznego odczytu wyników.

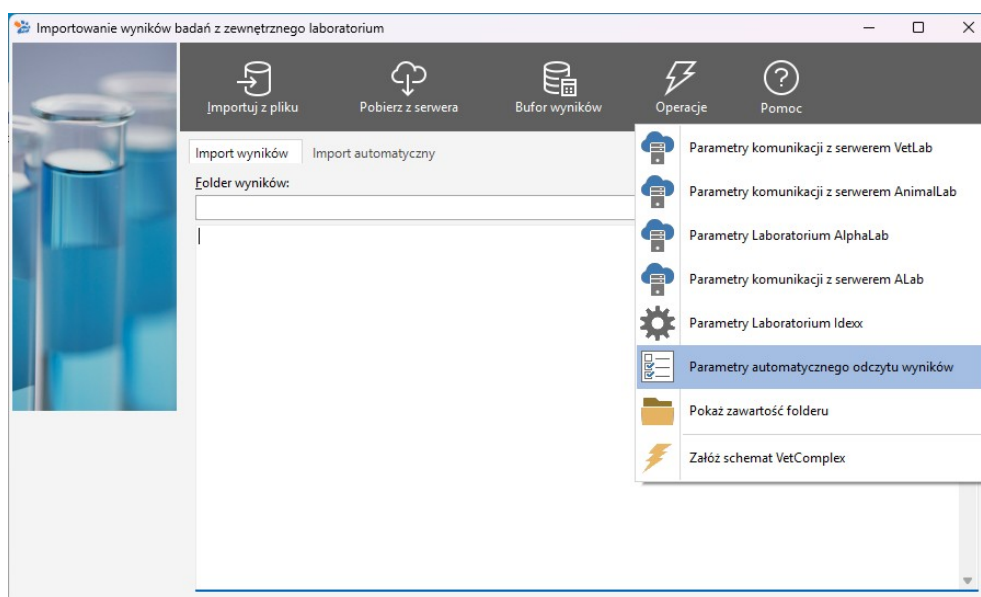

Następnie w oknie parametrów:

- zaznaczamy pole „Automatycznie sprawdzać wyniki badań diagnostycznych”
- klikamy przycisk „Bieżący komputer”, którym wskazujemy stanowisko z zainstalowanym programem Vetlaboratoria
- zaznaczamy pole „Sprawdzaj wyniki w folderze Vetlaboratoria” i wskazujemy folder wyników.

Należy tutaj użyć folderu ustawionego w programie Vetlaboratoria Wyniki.

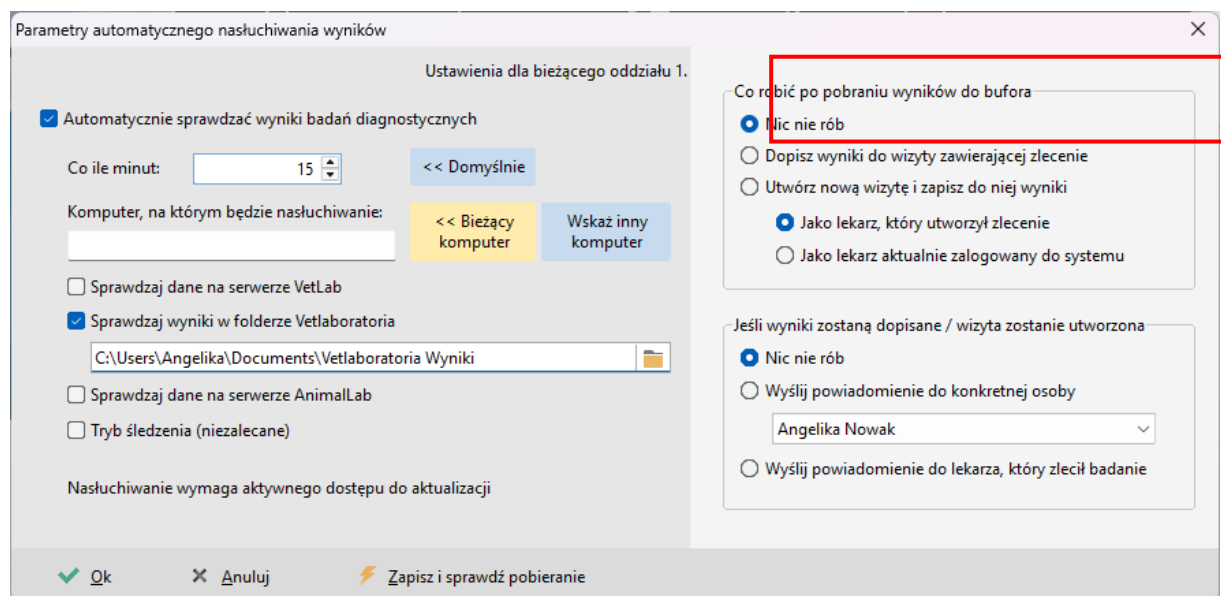

Po tak przeprowadzonej konfiguracji wyniki po pojawieniu się w folderze wyników będą automatycznie przesyłane do bufora wyników w Klinice XP.


Wpisywanie wyników do wizyty

1. Z bufora wyników:

Po wczytaniu wyników opisanych w Etapie III, zostają one umieszczone w tzw. buforze wyników. Ich podgląd będzie możliwy poprzez bezpośrednie przejście do okna „Importowanie wyników badań z




zewnętrznego laboratorium” → „Buforu wyników”.

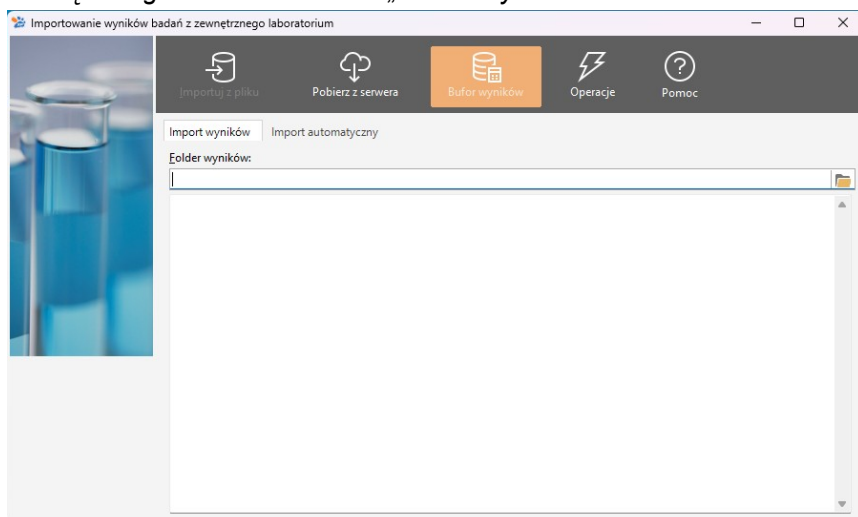

W „Buforze wyników badań” znajdują się wszystkie dotychczas importowane wyniki zarówno wczytane jak i oczekujące na dopisanie do wizyty.

PAMIĘTAJ: Jeżeli chcemy znaleźć wyniki, które już zostały dopisane do wizyty to konieczne jest odznaczenie znacznika „Tylko nie wczytane”.

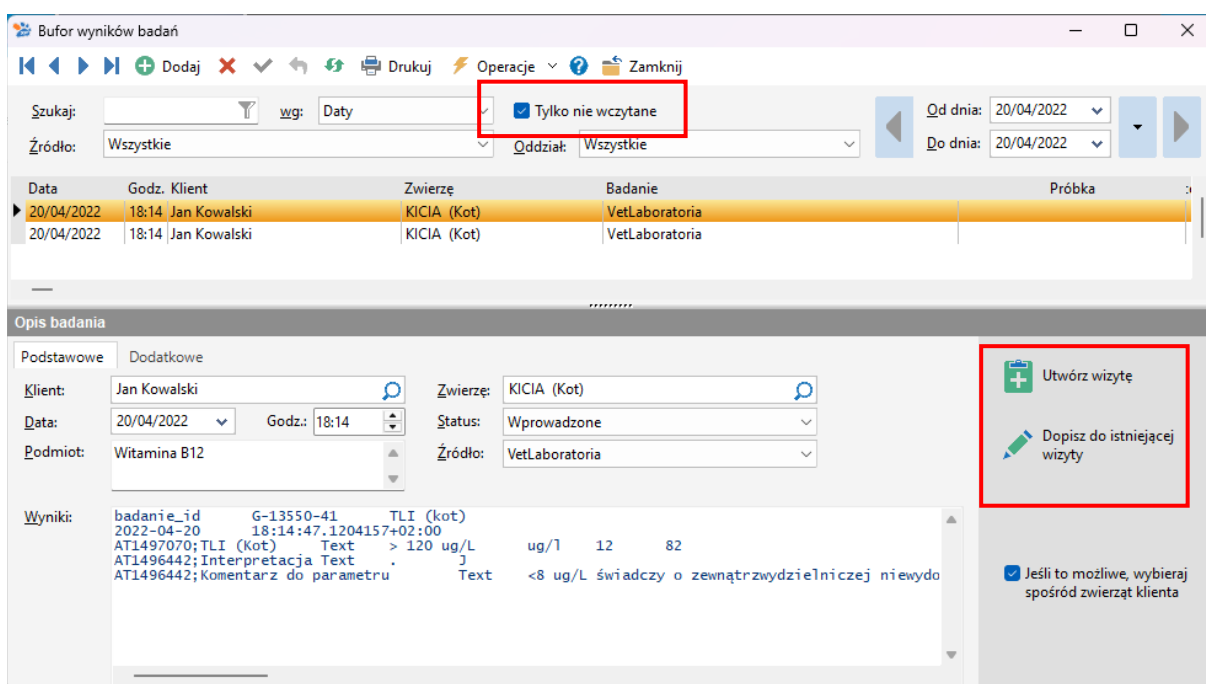

Stworzenie nowej wizyty z wczytaniem z bufora i zaznaczonym wynikiem odpowiednio tworzymy poprzez przycisk „Utwórz wizytę”. Następnie wskazujemy zwierzę, dla którego tworzymy nową wizytę.

PAMIĘTAJ: Nowa wizyta zostaje utworzona na dzień, w którym zostało przeprowadzone badanie. Datę tę możemy zmienić w polu „Data”.

Wyniki badań możemy także dopisać do istniejącej już w systemie wizyty, poprzez przejście do „Dodaj do istniejącej wizyty”, gdzie najpierw wybieramy pacjenta, a później wskazujemy wizytę, do której dopisane zostaną wyniki badań.

2. Edycja wpisanej wizyty

Wchodzimy do okna „Wizyty”, gdzie wybieramy tę, do której chcemy dopisać wynik z laboratorium:

Wizyty

Okcja WIZYTY Dane główne Ankieta Finanse Leczenie Profilaktyka Organizacja pracy Duże zwierzęta Dodatkowe Administrator Pomoc

Nowa wizyta Inne zdarzenie Przejrzyj Usuń Sortuj Filtruj Widok Operacje Drukuj Terminarz Odbierz Pomoc Zamknij

Wizyty

Od: 01/02/2025 Sobota
Do: 28/02/2025 Piątek

Spółka: Wszyscy
Lekarz: Wszyscy
Klient: Zwierzę: Wszelkie

Bt.	Data	Typ wizyty	Temp.	Właściciel	Zwierzę	Nr wizyty	Rozpoznanie	Trwała
	27/02/2025 10:10			Bak ****	Bakisu	9/25/01		1 min
	06/02/2025 12:29			Luka****	Pimke	8/25/01		1 min
	06/02/2025 12:30			Ang****	Pipi	7/25/01		1 min
	06/02/2025 12:29			Gie****	Miki	6/25/01		1 min

Właściciel: Luka****
ul. *****, XX-XXX, Wa****
Tel: 726-XXXX-XXXX
E-mail: XXX@XXXX.XXX

Zwierzę: Pimke
Pies rasy Mieszaniec
Plec: samiec, Maść: brak danych
Brak danych o wieku

Wizyta Nr 8/25/01

ZASTOSOWANE LEKI
ENIPROFLOXAN 10% 100ML ŚWINIA KURA GOLĄB BIOFAKTOR/ 1 OP
Seria: 1407231, Data ważności: 31/07/2025

WYDRUKI W TRAKCIE WIZYTY
ZGODA NA OPERACJĘ/ZABIEG
Rozpoznanie/podejście:
Rodzaj wykonywanego zabiegu:
Oświadczam, że zastosowałem się do zaleceń dla zwierzęcia głodówki*, a po wykonanym zabiegu zobowiązuję się do sprawowania nad nim opieki zgodnie z przekazanymi mi wytycznymi, które są dla mnie zrozumiałe.

ZGODA NA OPERACJĘ/ZABIEG
Rozpoznanie/podejście:
Rodzaj wykonywanego zabiegu:
Oświadczam, że zastosowałem się do zaleceń dla zwierzęcia głodówki*, a po wykonanym zabiegu zobowiązuję się do sprawowania nad nim opieki zgodnie z przekazanymi mi wytycznymi, które są dla mnie zrozumiałe.

Razem wizyt: 4 1 4 68,97 Łączny czas: 0:04 godz.

Szukaj lek. wet. Angelika Nowak Dokument: PARAGON 7/01/2025 Kwota: 20,97

Następnie przechodzimy do Edycji → zaznaczamy „Diagnostykę” i wyszukujemy wyniki naszego pacjenta.

PAMIĘTAJ: Do jednej wizyty można przypisać do ośmiu różnych wyników laboratoryjnych.

Wyniki można później wydrukować, dodać z listy dostępnych kolejne lub też modyfikować już dodane (np. usunąć błędnie przypisany wynik).

Klinika XP w. 5.36.20.93, TRYB SERWISOWY

OPCJE PRZEBIEG WIZYTY - ZWIERZĘ DOMOWE (TYLKO DO ODCZYTU) WIZYTY Dane główne Apteka Finanse Leczenie Profilaktyka Organizacja pracy Duże zwierzęta Dodatkowe Administrator Pomoc

Dodatkowe Wydruki Operacje **Przejdź do edycji** Zamknij

PRZEGŁĄD WIZYTY Nr: 8/25/01

06/02/2025 12:32

Waga: Temperatura:

WŁAŚCICIE

Łuk*****
ul.*****
XX-XXX War*****
Tel.: 726-XXX-XXX
E-mail: XXX@XXX.XX

ZWIERZ 012300013

Pimke
Pies rasy Mieszaniec
Płeć: samiec Maść: brak danych
Brak danych o wieku

Przebieg wizyty

OPCJE PRZEBIEG WIZYTY - ZWIERZĘ DOMOWE WIZYTY Dane główne Apteka Finanse Leczenie Profilaktyka Organizacja pracy Duże zwierzęta Dodatkowe Administrator Pomoc

Dodatkowe Wydruki Operacje **Zapisz wizytę**

PRZEGŁĄD WIZYTY Nr: 8/25/01

06/02/2025 12:32

Waga: Temperatura:

WŁAŚCICIE

Łuk*****
ul.*****
XX-XXX War*****
Tel.: 726-XXX-XXX
E-mail: XXX@XXX.XX

ZWIERZ 012300013

Pimke
Pies rasy Mieszaniec
Płeć: samiec Maść: brak danych
Brak danych o wieku

Przebieg wizyty

☐ Badanie ☐ Profilaktyka ☐ Obserwacja ☒ **Diagnostyka** ☐ Badania dodatkowe ☐ Kontynuacja leczenia

Wybierz rodzaj badań

Wybierz

Szukaj:

Wyniki badań diagnostycznych

Badanie	Wydrukuj	Ustawienia
AT TLI (kot)		
Zmieni/przejrzyj wyniki badania		
AT VetLaboratoria		
Zmieni/przejrzyj wyniki badania		
Badanie 3		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 4		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 5		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 6		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 7		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 8		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 9		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		
Badanie 10		
Dodaj badanie w ramach tej wizyty		

Wydrukuj wyniki Zamknij

...lub wybierz wyniki oczekujące w buforze:

Szukaj wg nazwiska: Jan Kowalski

Kolejność wg: ☒ Data ☐ Nazwiska

Data	Godz.	Klient	Zwierze	Opis
20/04/2022	18:14	Jan *****	KICIA (Kot)	VetLaboratoria
20/04/2022	18:14	Jan *****	KICIA (Kot)	VetLaboratoria

lek. wet. Angelika Nowak